


Instructie afname nasopharynx uitstrijk (diepe neuswat) t.b.v. SARS-CoV-2, Influenza en andere respiratoire verwekkers

Benodigdheden geleverd in respiratoire afname set

- Aanvraagformulier CBSL
- Respiratoire_afname set met:
 - o Flexibele wattenstok (dunne stok) op plastic drager voor nasopharynx afname
 - o Virustransportmedium in buis
- Safetybag
- Wit absorptie vel

Diepe neuswat
Nasopharynx

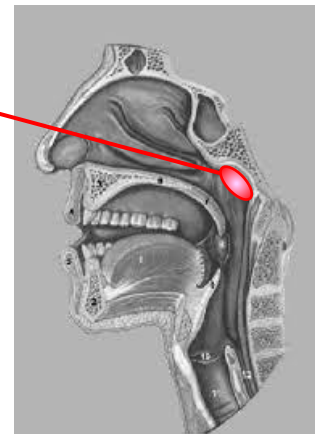

Andere benodigdheden

- Materialen voor persoonlijke bescherming (masker, handschoenen, eventueel bril)
- Alcohol 70%

Werkwijze afname

- Maak eerst een nasopharynx (diepe neuswat) uitstrijk (voor instructie zie hieronder)
- Plaats de wattenstok in de buis met virustransportmedium
- Breek of knip de wattenstok af bij het breekpunt
- Dop stevig dichtdraaien, de stok zet zich vast in de dop
- Zorg voor zorgvuldige ontsmetting van de buitenkant van de monsterverpakking (alcohol 70%)
- Verpakken in safety-bag, evt. aanvraagformulier invullen en formulier en safety bag met container in grijze envelop bij CBSL aanleveren, stop het aanvraagformulier NIET in de safetybag.

Instructie afname nasopharynx uitstrijk

- Laat patiënt neus snuiten
- Laat patiënt hoofd achterover buigen
- Trek de neuspunt iets omhoog
- Schuif de wattenstok voorzichtig door een neusgat zo diep mogelijk in de neus tot een lichte weerstand wordt gevoeld (3/4 van het stokje gaat neus in)
- Roteer de wattenstok enkele malen rond in het neusgat tegen de achterwand (nasopharynx) voor het bemonsteren van cellulair materiaal
- Trek de wattenstok langzaam terug
- *Alleen bij niet bereiken nasopharynx andere neusgat proberen*
- Plaats de wattenstok in het virustransportmedium, voor vervolg zie boven